

機械器具 70 歯科用鑄造器
一般医療機器 歯科技工用高周波鑄造器 70751000

ベゴ フォルナックス T

【警告】

- ①本品は歯科補綴物作成用の鑄造器である。
【使用目的、効能又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- ②本品の操作は習熟したもの以外は使用しないこと。
- ③使用者の安全を守り、本品を正しく使用するために注意事項を必ず守ること。
- ④故障したときは、適切な指示を行い、修理は専門家に任せること。
- ⑤高温のリング等を扱うため、断熱手袋等を装備し、やけどをしないように注意すること。
- ⑥心臓ペースメーカをお使いの方は、本品を使用しないこと。

【禁忌・禁止】


次の行為は危険なため行わないこと。

- ①本品の改造
- ②不具合、故障状態での使用
- ③未整備状態での使用
(未整備状態とは、定期点検や日常の点検を行っていない状態をいう)
- ④本品は、電磁波妨害が存在する環境下では誤動作を起こす可能性があるため、電磁波を発生させる機器の周辺では使用しないこと。また、本品の周辺で携帯電話、LAN などの電磁波を発生させる機器を使用しないこと。
- ⑤ルツボ、リング等の付属品は当該専用品を使用すること。他社のものを使用した場合は、故障の原因やケガをする可能性がある。

【形状・構造及び原理等】

形状：

*斜面図

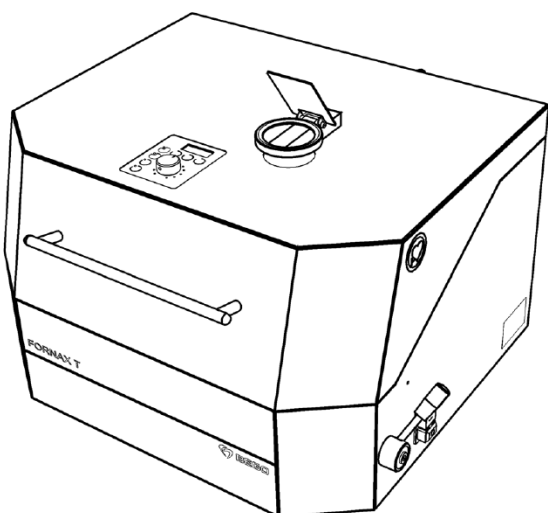

動作原理：高周波を熱源として歯科用合金を溶解し、遠心力を鑄込み力として鑄型に鑄造する。

【使用目的、効能又は効果】

高周波により歯科用合金を溶解・鑄造する装置である。

【品目仕様等】

性能

- 1) 電源：単相 200V (50/60 Hz)
- 2) 鑄造方式：高周波による遠心鑄造方式
- 3) 溶解方式：高周波加熱
- 4) 制御機構：手動制御
- *5) 冷却水の供給：内部タンクによる循環式
- *6) 鑄造器外形寸法：高さ 450mm×幅 710mm×奥行き 630mm
(カバー開口時の高さ 960mm)
- *7) 重量：約 80kg

【操作方法又は使用方法等】

- 1) 取り付け、設置
 - ①本品の取り付け、設置は専門知識を持った担当者が行うこと。
 - ②本品の詳細な取り付け、設置は付属の取扱説明書を参照すること。
 - ③本品は安定した、しっかりした台の上に設置すること。
- 2) 操作方法又は使用方法
本品の詳細な操作方法および使用法は、付属の取扱説明書を必ずお読みください。

【使用上の注意】

詳細については取扱説明書を使用前に必ずお読みください。

- 1) 使用前の注意事項
 - ①アースが完全に接続されていることを確認すること。
- 2) 使用中の注意事項
 - ①本品から異臭、異音が出るときは速やかに本品の電源を切り、弊社にご連絡ください。
 - ②本品全般に異常が起きないか絶えず監視すること。
 - ③外装温度が上昇するため、体が本品に触れないようにすること。
- 3) 使用後の注意
 - ①本品の温度が下がってから、次回からの使用に支障のないように清拭すること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

- 1) 貯蔵・保管方法
 - ①水のかからない場所に保管すること。
 - ②気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分を含んだ空気などにより悪影響が生ずるおそれのない場所に保管すること。
 - ③傾斜、振動、衝撃（運搬時を含む）などに対応する安定状態に注意すること。
 - ④化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。
 - ⑤本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。
- 2) 耐用期間
記載の耐用期間は自己認証（当社データ）による。
製造出荷後、正規の保守点検を行った場合に限り 10 年間とする。

取扱説明書を必ずご参照ください。

【保守・点検に係る事項】

詳細については取扱説明書「日常のお手入れ」の項をご使用前に必ずお読みください。

- 1) 本品及び部品は必ず定期点検を行うこと。
- 2) 長い間使用しなかった本品を再使用する場合は、使用前に必ず装置が正常、かつ安全に作動することを確認すること。

【包装】

鋳造器本体 1

[付属品]

セラミックルツボ 6

グラファイトインサート 6

セラミックインサート 6

ベースソケットモールドフォーマー(サイズ3、6、9) 各1

*テスト用/ベゴ ウイロファイン (届出番号:26B1X10008001003) 1

*テスト用/BEGO ウイロボンド280 (認証番号:221AKBZI00025000) 1

*テスト用/BEGO ウイロニット EH (認証番号:221AKBZI00018000) 1

*テスト用/ベゴ ベゴゾルK (届出番号:26B1X10008001003) 1

*テーブルマット 1

*CD-ROM 1

*ヒューズ 2

*警告ステッカー 2

*書類一式

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元: 株式会社ニッシン (選任製造販売業者)

住所 : 〒621-0001

: 京都府亀岡市旭町樋ノ口 88

電話番号 : 075-257-7255 (西日本営業所)

: 03-3836-3691 (東日本営業所)

: 0120-571939 (フリーダイヤル)

電話受付時間 月～金 (祝日を除く)

午前 10:00～午後 5:00

FAX : 075-257-7256

製造元 : ベゴ ブレーマ ゴールドシュレーゲライ

ウィルヘルム ヘルプスト ゲ エム ベ

ハ ウンド コ カゲ

BEGO Bremer Goldschlägerei Wilh. Herbst GmbH &

Co. KG

国名 : ドイツ

販売元 : 株式会社アイキャスト

住所 : 〒604-0847

京都市中京区烏丸通二条下ル秋野々町 513

京都第一生命泉屋ビル 8F

電話番号 : 075-257-7270

FAX : 075-257-7271